

### 三 . drainase

11. buka tutup putih.

12. Buka transfer yang diatur untuk mengalir.




15. Buka transfer yang diatur untuk diisi.



### 四 .Flush

13. saat drainase selesai, tutup set transfer.


14. buka penjepit biru dan putih untuk menghilangkan udara dari set (hitung sampai 5). Jepit klem putih pada saluran pembuangan.

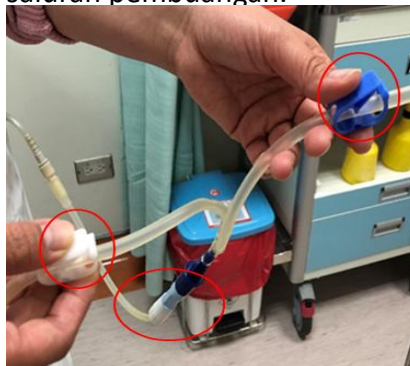

### 五 .Isian


### 六 .Dari pengisian

16. ketika pengisian selesai, klem transfer Set dan klem biru pada jalur pengisian.

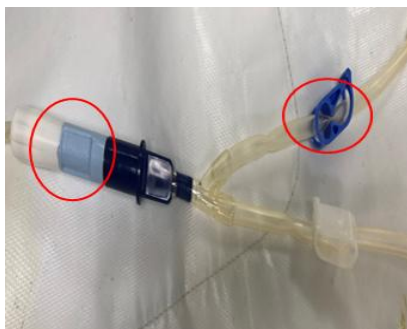

### 七. Matikan


17. Gunakan lotion tangan kering dan periksa kembali apakah kateter sisi pasien dan klip biru dan putih semuanya tertutup.

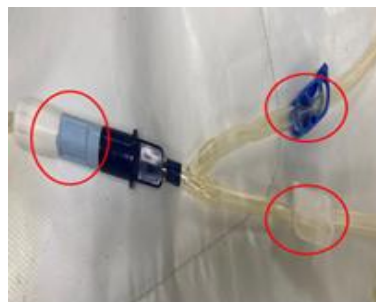

18. buka paket mini cap.



19. Lepaskan set transfer dan putar tutup mini ke set transfer hingga terpasang erat.

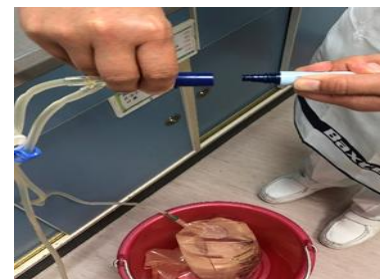

## Dialisis Peritoneal Dialisis Peritoneal Twin Prosedur Pengoperasian Tas Twin bag 換液技術 (印尼文)



Diproduksi oleh Departemen  
Keperawatan

Konsultasi telepon : ( 04 ) 7238595-7881

Jam layanan bantuan:

Senin hingga Sabtu Pagi : 8 : 00-12 : 00

Senin hingga Jumat Sore : 1 : 30-5 : 30

Puji hotline pujian : ( 04 ) 7238595 - 3920

Hotline pengaduan : ( 04 ) 7238595 - 3925

Situs Web Nefrologi  
: //www.cch.org.tw/nephro

編碼：5959-單張-印文-002-03

印文翻譯日期：2025年9月

依據：5959-單張-中文-0010-04

中文修訂日期：2023 年 5 月



彰化基督教醫療財團法人  
**彰化基督教醫院**  
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION  
CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

## Teknologi pertukaran cairan dialisis kantong ganda



### —. Persiapkan Persediaan

1. Tutup pintu jendela, AC, Kipas angin.




2. **Pakai** masker. harus menutupi rongga hidung dan Mulut. Keluarkan set transfer mini dari pakaiannya.



3. Semprotkan alkohol 75% pada meja, **lalu lap hingga kering dengan handuk kertas dengan gerakan memutar dari dalam ke luar.**




4. Persiapkan dialisis, Topi mini, Lakukan kebersihan tangan.

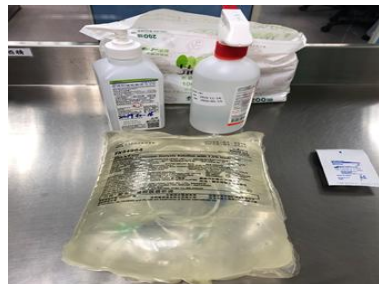

5. Cuci tangan setidaknya 20 kali dengan Hand wash.



6. Memeriksa solusi PD: termasuk tanggal kedaluwarsa, volume, konsentrasi, kejernihan, bocor, cincin tarik dan setiap pemecahan-dari frangible hijau dekat solusi Bag.

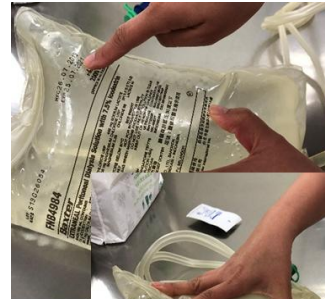


### —. Sambungkan ke Ultra Bag

7. Jepit klem biru dan putih.



8. **Jepit** hijau frangible dekat Solution Bag.

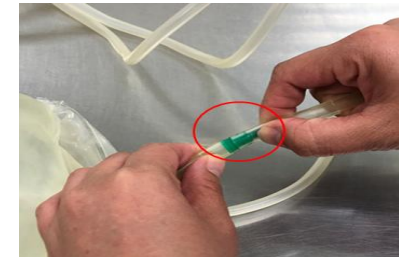

9. Lakukan kebersihan tangan.



10. Memegang transfer diatur dengan mantap sementara jari kelingking menggenggam cincin tarik. Cincin tarik setelah memutus sambungan putih Tutup dan segera sambungkan ke transfer yang ditetapkan.

